

Unterschrank geschlossen
Kodak Medical X-ray processor
Montageanleitung

Bestellnummer: 1267-0-0012

Closed cabinet
Kodak Medical X-ray processor
Assembly instruction


Order number : 1267-0-0012

Lieferumfang :

Rahmen links	1x
Rahmen rechts	1x
Frontklappe	1x
Frontstrebe	1x
Seitenverkleidung	2x
Rückwand	1x
Zylinderschraube M5x12 DIN 912	8x
Senkschraube M6x40 DIN 7991	4x
Kabelbinder 280 mm	3x
Innensechskantschlüssel SW 4	1x

Part list of shipment :

frame left	1x
frame right	1x
front panel	1x
front brace	1x
side panel	2x
back panel	1x
bolt M5x12 DIN 912	8x
bolt M6x40 DIN 7991	4x
cable clamp 280 mm	3x
allen key (size 4)	1x

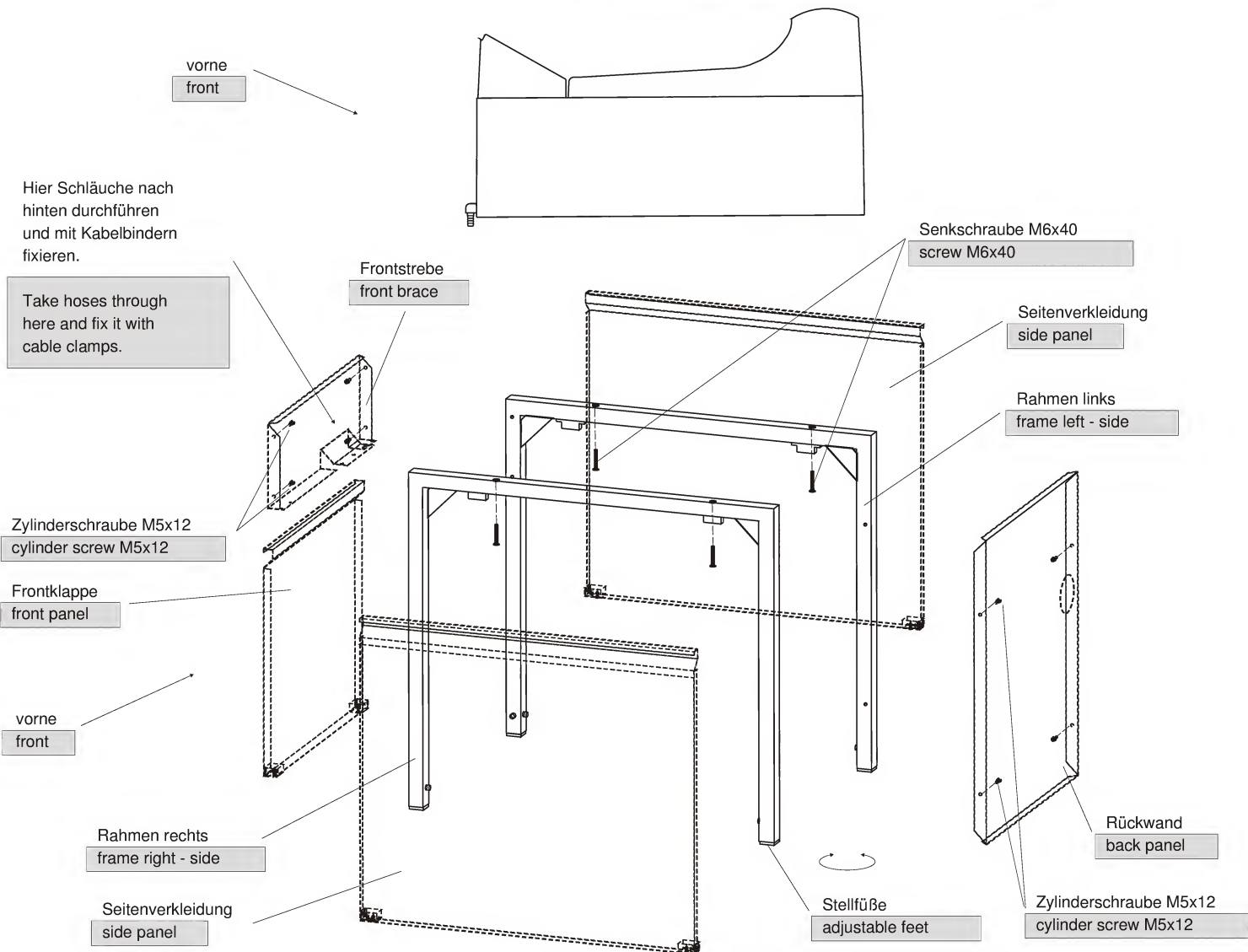

Montageanleitung:

1. An der Maschine die Seitenstreifen der Bodenplatte entfernen.
2. Frontstrebe und Rückwand mit dem Rahmen verschrauben.
3. Maschine auf Unterschrank montieren.
4. Höhe einstellen.
(mit Wasserwaage ausrichten)
5. Seitenteile und Frontklappe einhängen.
6. Alle Schrauben des Gestells fest anziehen.

Assembly instruction:

1. Remove side parts of the floor plate from the processor..
2. Srew together front brace and back panel with the frames.
3. Mount machine onto closed cabinet.
4. Adjust height.
(with spirit level)
5. Put in the side panels and the front brace.
6. Tighten all screws from the base table.



EASTMAN KODAK

Rochester, New York 14650, USA